

RS cure

**Für das perfekte Finish
deiner Bauteile –
360°- Aushärten mit einem
Knopfdruck**

Das automatische Belichtungssystem der RS cure härtet deine Druckteile dank leistungsstarken LEDs von allen Seiten homogen aus. Die integrierte Vakuumtechnik ermöglicht eine hervorragende Aushärtung der Materialien. Somit können die Materialien von vielen Materialherstellern validiert verarbeitet werden. Die prozessgesteuerte Anbindung an deinen Drucker ermöglicht dabei, dass stets automatisch das richtige Programm ausgewählt wird und die mechanischen Eigenschaften sowie die Biokompatibilität des Endprodukts erreicht werden. Die Voreinstellungen werden in enger Zusammenarbeit mit den Materialpartnern geprüft und validiert, um die Prozesssicherheit gewährleisten zu können. Kombiniert mit der stapelbaren RS wash, bietet die RS cure einen einfachen und validierten Arbeitsablauf.



Wireless Anbindung
zum Drucker




Validierter
Prozess



Kompatibel mit verschiedenen
Materiallieferanten



Arbeitet mit
Vakuum

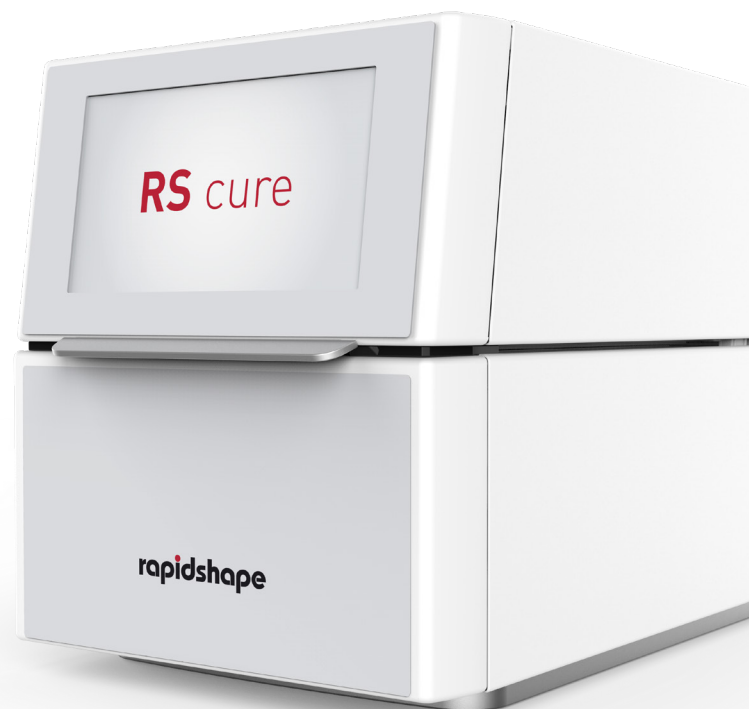

Leistungsparameter	RS cure
Volumen	130 x 75 x 60 mm
Aushärtungszeit	ca. 6-10 Minuten (materialabhängig)
Anschlüsse	WLAN/LAN
Maße (B x H x T)	230 x 270 x 380 mm
Technologie	mit Vakuum