

# PRO 30

VIELSEITIG PRÄZISE UND STARK  
FÜR MODERNE DENTALLABORE



**rapidshape**

# PRO 30

## *Leistungsstark und präzise*

- 4K Light Engine-Druck mit einer Pixelgröße von  $\pm 25 \mu\text{m}$ , optimiert für hochpräzises Drucken
- Leistungsstarke Druckgeschwindigkeiten dank patentierter Force Feedback- und RS Turbo-Technologie
- Integrierte Kammerheizung für mehr Flexibilität bei der Harzverwendung

## *Flexible Drucklösungen für Dentallabore*

Mehr als 200 Harze ermöglichen über 15 dentale Anwendungen



**Meister Modelle**  
bis zu 6 Modelle

---

**25 Minuten**

50  $\mu\text{m}$  Schichtstärke



**Prothesenbasen**  
bis zu 13 Zahnprothesenbasen

---

**90 Minuten**

100  $\mu\text{m}$  Schichtstärke



**Chirurgieschablonen**  
bis zu 10 Chirurgieschablonen

---

**30 Minuten**

100  $\mu\text{m}$  Schichtstärke

## Zuverlässigkeit mit Wirkung

- **Integrierte Kameraüberwachung**  
Überträgt den Druckjob-Status automatisch an das RS Customer Portal – für Produktionskontrolle und Qualitätsbewertung
- **Robuster DLP-3D-Drucker**  
Langlebig konstruiert mit hochwertigen Glas-Resinbehältern
- **Intelligente Konnektivität**  
Nahtlose Verbindung von Software über 3D-Drucker bis hin zu WASH und CURE

## Rapid Support

### 1 Jahr CARE Plus Plan inklusive

#### Der Service umfasst:

- 90-Tage-Coaching mit einem Rapid Shape Digital Workflow Specialist
- Fortlaufender Support sowie Zugang zu Workflow-Guides und Troubleshooting-Tools
- Sensor Einsendung (1x pro Jahr) zur professionellen Kalibrierung
- Sofortige kostenlose Reparatur oder Gerätetausch, falls erforderlich



Artikelnummer:  
**A.RS.PRO30\_RS**



# RS Crystal Polish

Hochglanz in Rekordzeit – fast ohne Polieren



**RS Crystal Polish Reservoir**

Artikelnummer: BGM183401



*Kompatible Harze*

detax keystone  
industries



*Bis zu 18 Schienen in nur 90 Minuten*

- Kristallklare Druckergebnisse – ohne Vergilbung nach dem Wasch- und Aushärtungsprozess
- Reduziert den Polieraufwand um bis zu 90 % nach dem Aushärten

# PRO 30 Accessories

## Zubehörpaket

Artikelnummer: RS006175

*Ihr Setup für durchgängiges und sauberes Drucken*

- UV-beständige Aufbewahrung für bis zu 5 Reservoirs
- 4 Glas-Reservoirs mit Deckel
- Zusätzliche Verbrauchsmaterialien



## PRO 30 Reservoir

Artikelnummer: BGM183400



### *Robustes Glass Reservoir*

- Robustes Glasreservoir für höchste Belastbarkeit
- Integrierter RFID-Chip zur Anzeige des Harztyps

# Post-Processing Solution

Smarte Vernetzung zwischen Rapid Shape 3D-Druckern mit WASH und CURE – für eine automatisierte und fehlerfreie Prozesskette



## WASH

Artikelnummer: A.RS.PROWASH\_RS2

- Hohe Kapazität: 6 Vollbogen-Jobs
- Effizienter 2-Stufen-Waschzyklus mit Trocknung
- Geruchsarm durch Aktivkohlefilter
- Vorinstallierte Waschparameter für 100+ Harze
- Stapelbar mit CURE

## CURE

Artikelnummer: A.RS.PROCURE\_RS2

- Maximale Kammerkapazität: 6 Vollbogen-Druckjobs
- Integriertes Vakuumsystem: kein Einsatz von Stickstofftanks oder -generatoren erforderlich
- Optimale 3D-Druckergebnisse: 360° Aushärtung in kontrollierter Vakuumumgebung
- Integrierter Stickstoffanschluss



SCANNEN UND WASH  
KENNENLERNEN



SCANNEN UND CURE  
KENNENLERNEN



# rs VIVO



## RS VIVO Model

Premium-Modellharz, ideal für ästhetische und präzise Dentalmodelle, einschließlich Stumpf- und Implantatmodelle.

*Erhältlich in den Farben Elfenbein und Sand.*

## RS VIVO Model Natural Pink

Hochwertiges 3D-Druckharz, entwickelt, um das natürliche Erscheinungsbild des oralen Weichgewebes realistisch nachzubilden. Ideal zum Farbabgleich für Veneers, Kronen und andere prothetische Arbeiten.

*Erhältlich in der Farbe „Natural Pink“.*



PRODUKT	MENGE	ARTIKELNUMMER
RS VIVO Model Ivory	1 kg	RS006190
RS VIVO Model Ivory	5 kg	RS006216
RS VIVO Model Sand	1 kg	RS006192
RS VIVO Model Natural Pink	1 kg	RS006191



gedruckt mit **rs VIVO**  
Model Natural Pink and Ivory



# Kunden, die **uns** vertrauen!

//

*Der PRO 30 ist wirklich ein 3D-Drucker der nächsten Generation. Wir verwenden ihn hauptsächlich zum Drucken von Modellen, und die große Plattform ermöglicht es uns, viele davon gleichzeitig mit beeindruckender Präzision herzustellen. Er hat sich als idealer Drucker für Implantatmodelle erwiesen – die Genauigkeit und Kapazität machen ihn perfekt für unseren Arbeitsablauf.*


//



**Przemek Seweryniak**

CDT und CEO von Cosmodent, Schweden

## Jetzt **Demo** vereinbaren!

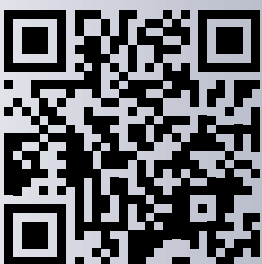

QR scannen und eine  
30-Minuten Remote-Demo  
anfordern!

Kontaktinformationen zum Kundenservice:  
[service@rapidshape.de](mailto:service@rapidshape.de)